

PARA LAS HOJAS REUTILIZABLES DEL GLIDESCOPE SISTEMA DE TITANIO

Cuando utilice las hojas reutilizables de titanio, seleccione el cable de video GlideScope con dos conectores circulares plásticos (vea la FIGURA 1).



FIGURA 1

1. CONECTE EL CABLE DE VIDEO AL MONITOR Y A LA HOJA

- Seleccione el laringoscopio (hoja) de video GlideScope que sea apropiado para el paciente.
- Para conectar el cable de video al puerto en la parte posterior del monitor, alinee la flecha en el cable de video con la flecha en el puerto e inserte (vea la FIGURA 2). Escuchará un clic cuando el cable se conecte correctamente.
- Para conectar el otro extremo del cable de video a la hoja, alinee la flecha en el cable de video con la flecha en la hoja e inserte. Escuchará un clic cuando el cable se conecte correctamente.

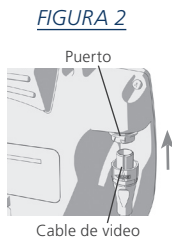


FIGURA 2

2. PREPARE EL SISTEMA GLIDESCOPE

- Encienda el sistema al presionar el botón de Encendido (vea la FIGURA 3).
- Asegúrese de que el sistema esté funcionando correctamente al verificar que la imagen que se muestra en el monitor sea de la cámara del video laringoscopio (hoja). Una porción pequeña de la hoja puede ser visible en la esquina superior izquierda o la parte superior de la pantalla.
- Si es necesario, deje que se caliente la función antiempañado GlideScope Reveal™ por 30 a 120 segundos.

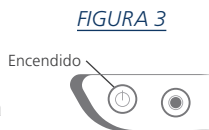


FIGURA 3

PARA LA CONFIGURACIÓN DE HOJAS DESECHABLES DEL SISTEMA DE TITANIO, VEA EL LADO DE REVERSO.

PARA LAS HOJAS DESECHABLES DEL GLIDESCOPE SISTEMA DE TITANIO

Cuando usa hojas desechables para el sistema de titanio, seleccione el Cable inteligente de GlideScope con un conector plástico circular y un conector de metal (vea la FIGURA 1).


FIGURA 1



1. CONECTE EL CABLE INTELIGENTE AL MONITOR Y A LA HOJA.

- Seleccione el laringoscopio (hoja) de video GlideScope que sea apropiado para el paciente.
- Para conectar el Cable inteligente al puerto en la parte posterior del monitor, alinee la flecha en el conector plástico del Cable inteligente con la flecha en el puerto e inserte (vea la FIGURA 2). Escuchará un clic cuando el cable se conecte correctamente.
- Para conectar el otro extremo del Cable inteligente a la hoja, alinee la flecha en el conector de metal del Cable inteligente con la flecha en la hoja e inserte.

FIGURA 2

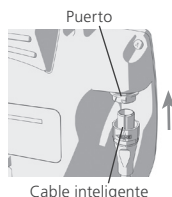

2. PREPARE EL SISTEMA GLIDESCOPE

- Encienda el sistema al presionar el botón de Encendido (vea la FIGURA 3).
- Asegúrese de que el sistema esté funcionando correctamente al verificar que la imagen que se muestra en el monitor sea de la cámara del video laringoscopio (hoja). Una porción pequeña de la hoja puede ser visible en la esquina superior izquierda o la parte superior de la pantalla.
- Si es necesario para evitar que se empañe, espere 30 a 120 segundos para que se caliente el LED.

FIGURA 3

